

INHALÁTORY OMRON

ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO PACIENTA



OMRON

K ČEMU SLOUŽÍ INHALÁTOR?



Inhalátory jsou zařízení, která přeměňují tekuté léčivo na aerosol. Vdechovat aerosol je možné prostřednictvím masky nebo náustku.

Značka Omron nabízí široké spektrum klinicky testovaných inhalátorů, které svým použitím vyhovují odlišným potřebám pacientů.

VÝHODY INHALAČNÍ LÉČBY



Inhalační léčba respiračních onemocnění efektivně aplikuje léky přímo do dýchacích cest a tím minimalizuje vedlejší účinky léčiva.

Jednou z hlavních výhod inhalační léčby je její jednoduchost. Stačí pouze přirozeně dýchat a tím inhalovat léčivo, které je možno dle instrukcí lékaře i kombinovat.

DŮLEŽITÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKON INHALÁTORŮ




MMAD (Median Mass Aerodynamic Diameter): střední velikost částic mlžiny – je určující pro ukládání léčiva v různých částech dýchacích cest.

Nebulizační výkon – množství přeměněné léčivé tekutiny na aerosol v ml/min. Dle toho lze odhadnout délku procesu inhalace.

LÉČBA DÝCHACÍCH CEST

Velikost částic aerosolu vytvořeného inhalátorem není jednotná, ale jedná se o částice různých velikostí. Velikost částice určuje, kde přesně v dýchacích cestách bude mít léčebný efekt.

- 1 Horní cesty dýchací +7,5 μ m**
Rýma, sinusitida, zánět nosohltanu, zánět mandlí, zánět hrtanu, běžné nachlazení.
- 2 Střední cesty dýchací 4,5–7,5 μ m**
Zánět průdušnice a zánět průdušnice a průdušek.
- 3 Dolní cesty dýchací 2–4,5 μ m**
Astma, chronická obstrukční plicní nemoc, bronchitida, bronchiolitida, bronchiektázie, bronchopneumonie.

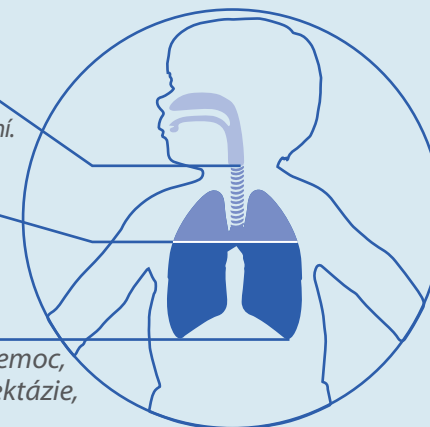

KDO BUDE INHALÁTOR UŽÍVAT?

Při rozhodování o nákupu inhalátoru je nutné se zamyslet, kdo bude inhalátor primárně používat.

- Nemluvnata a malé děti vyžadují nižší nebulizační výkon než dospělí.
- Dětem, které často trpí ucpaným nosem, může být přínosný inhalátor s nosním nástavcem.
- U masky je důležité vybrat správnou velikost, aby na obličej správně seděla.
- Pro pacienty, kteří potřebují inhalační léčbu i mimo domov je vhodný přenosný inhalátor.



Obchodní zastoupení OMRON pro ČR:



info@celimed.cz, infotel.: +420 475 211 113
www.celimed.cz

All for Healthcare

INHALÁTOR	 MicroAIR U100	 DuoBaby		 C28P	 A3 Complete			 C801 KD / C801	 C803
POPIS	Přenosný inhalátor do kapsy	2v1 inhalátor s nosním nástavcem		Inhalátor pro časté použití	Unikátní inhalátor s možností volby zacílení léčby na horní/střední nebo dolní cesty dýchací			Inhalátor pro nemluvnata a děti*	Lehký a tichý inhalátor
VÝHODY PRODUKTU	• Tichý • Přenosný, kapesní velikost, na baterie • Efektivní zacílení léčiva • Inhalace je možná v jakékoli poloze	• Zmírňuje příznaky ucpaného nosu • Snižuje riziko infekce • Léčba horních a dolních cest dýchacích • Hygienické, plně omyvatelné doplňky		• Vysoce výkonný • Rychlá nebulizace • Pro časté a intenzivní používání	• Kompletní léčba • Výkonná nebulizace • Rychlá nebulizace • Pro časté a intenzivní používání			• Efektivní léčba • Malý a tichý • * C801 bílý – bez postaviček, vhodný pro celou rodinu	• Tichý • Lehký a malý
UŽIVATEL	DOSPĚLÝ, DÍTĚ, NEMLUVNĚ 	DOSPĚLÝ, DÍTĚ, NEMLUVNĚ 		DOSPĚLÝ, DÍTĚ 	DOSPĚLÝ, DÍTĚ 			DÍTĚ, NEMLUVNĚ 	DOSPĚLÝ, DÍTĚ 
INDIKACE	DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ 	HORNÍ CESTY DÝCHACÍ 	DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ 	DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ 	HORNÍ CESTY DÝCHACÍ 	STŘEDNÍ CESTY DÝCHACÍ 	DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ 	DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ 	DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ 
	Astma, bronchitida, bronchiolitida, chronická obstrukční plicní nemoc	Ucpaný nos, rýma, alergická rýma, zánět hrtanu	Astma, bronchitida, bronchiolitida, chronická obstrukční plicní nemoc	Astma, bronchitida, bronchiolitida, chronická obstrukční plicní nemoc	Ucpaný nos, rýma, alergická rýma, zánět hrtanu	Ucpaný nos, rýma, alergická rýma, zánět hrtanu	Astma, bronchitida, bronchiolitida, chronická obstrukční plicní nemoc	Astma, bronchitida, bronchiolitida, chronická obstrukční plicní nemoc	Astma, bronchitida, bronchiolitida, chronická obstrukční plicní nemoc
KDE POUŽÍT	Přenosný 	Domácí použití 		Domácí použití 	Domácí použití 			Domácí použití 	Domácí použití 
STŘEDNÍ VELIKOST ČÁSTIC	4,5 µm	9 µm	4 µm	3 µm	10 µm	5 µm	3 µm	3 µm	3 µm
NEBULIZAČNÍ VÝKON	>0,25 ml/min	0,4 ml/min	0,2 ml/min	0,5 ml/min	0,7 ml/min	0,5 ml/min	0,3 ml/min	0,3 ml/min	0,3 ml/min